

waterpik®

Waterpik® Water Flosser 600 Series



www.waterpik.com

FONTOS

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST.

- Ez a termék háztartási használatra készült.

Elektromos termékek használatakor, különösen, ha gyerekek vannak jelen, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

VESZÉLY: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne nyúljon nedves kézzel a csatlakozódugóhoz.
- Ne tegye vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
- Ne használja fürdés közben.
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy behúzódhat egy kádba vagy mosogatóba.
- Ne nyúljon vízbe esett termékhez. Azonnal húzza ki.
- Az első használat előtt és a termék élettartama alatt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e.

FIGYELEM:

Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne csatlakoztassa a készüléket olyan feszültségrendszerhez, amely eltér a készüléken vagy a töltőn megadott feszültségrendszertől. A nem megfelelő feszültséggel történő használat károsíthatja a terméket, és érvényét veszti a garancia.
- Ne irányítsa a vizet a nyelv alá, a fülbe, az orrba vagy más érzékeny területekre.

Ez a termék olyan nyomást képes előállítani, amely komoly károkat okozhat ezeken a területeken.

- Ne irányítsa a vizet az orrába vagy a fülébe. A potenciálisan halálos amóba,

A Naegleria fowleri jelen lehet néhány csapvízben vagy klórozatlan kútvízben, és halálos lehet, ha ezekre a területekre kerül.

- Ezt a terméket csak az útmutatóban leírtak szerint vagy a fogorvosa által javasolt módon használja.
- Csak a Water Pik, Inc. által javasolt hegyeket és tartozékokat használjon.
- Ne ejtsen vagy dugjon idegen tárgyat semmilyen nyílásba vagy tömlőbe.
- Tartsa távol az elektromos vezetéket a készüléktől fűtött felületek.


- Ne használja a szabadban, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- Ne használjon jódot vagy vízben oldhatatlan koncentrált illóolajokat ebben a termékben. Ezek használata csökkentheti a teljesítményt és lerövidíti a termék élettartamát. Ezen termékek használata érvénytelenítheti a garanciát.
- A tartályt csak vízzel vagy más fogorvos által javasolt oldattal töltsze fel.
- Használat előtt távolítsa el minden száj ékszerét ez a termék.
- Ne használja, ha nyílt seb van a nyelvén vagy a szájában.
- Ha kezelőorvosa vagy kardiológusa azt tanácsolta Önnek, hogy fogászati beavatkozások előtt kapjon antibiotikus premedikációt, konzultáljon fogorvosával, mielőtt ezt a műszert vagy bármilyen más szájhygiéniai segédeszközt használna.
- Ha a Pik Pocket™ hegy (nem tartozék minden modellhez) bármilyen okból leválik a tengelyről, dobja el a hegyet és a tengelyt, és cserélje ki új Pik Pocket™ hegyre (PP-100E).
- Ne használja ezt a terméket több mint 5 perc minden kétórás periódusban.
- Az egység 5 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
- A készülék polarizált csatlakozóval rendelkezik (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Biztonsági jellemzőként ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik polarizált aljzatba. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a dugót. Ha továbbra sem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne kísérelje meg semmilyen módon módosítani a csatlakozót.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan. biztonság.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a készüléket le kell selejtezni.
- Ne használja ezt a terméket, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Vegye fel a kapcsolatot a Water Pik, Inc.-vel vagy látogasson el a www.waterpik.com oldalra.

**ŐRIZZE MEG
EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

Termékleírás	5
Kezdés	6
A Waterpik® Water Flosser tisztítása és hibaelhárítása	8

TERMÉKLEÍRÁS


1. Csuklós tartályfedél
2. Vízátroló
3. Hegy tároló a fedél alatt
4. Bekapcsoló gomb
5. Üzem módválasztó gomb
6. LED üzemmódjelzők
7. Nyomásszabályozó tárcsa
8. Hegy
9. Forgó vezérlőgomb
10. Hegykiadó gomb
11. Víz BE/KI kapcsoló
12. Fogantyú
13. Vízömlő
14. Alj

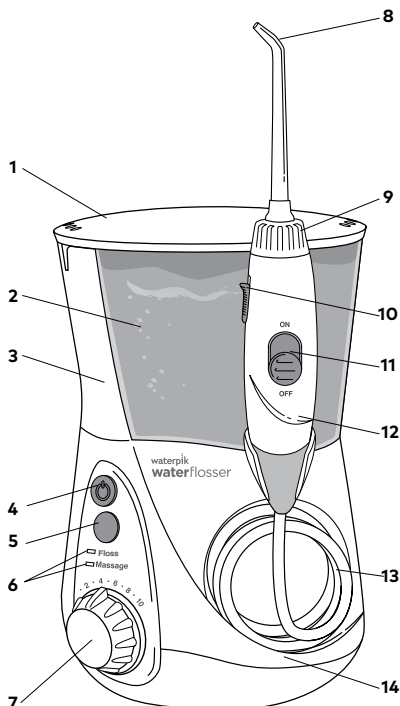






Hegyek

- A. Fogszabályozási hegy*
 - Merevítő/Általános használatra
- B. Pik Pocket™ hegy*
 - Parodontális zsebek/Furkációk
- C. Plaque Seeker™ hegy*
 - Implantátumok/Koronák/Hidak
 Tartók/Általános felhasználás
- D. Fogkefe hegy*
 - Általános használat
- E. Klasszikus Jet hegy**
 - Általános használat
- F. Nyelvtisztító**
 - Frissebb lehelet

NEM MINDEN MODELL TARTALMAZ MINDEN HEGYET

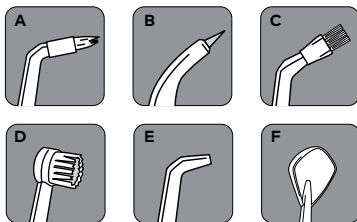

* Cserélje 3 havonta ** Cserélje 6 havonta

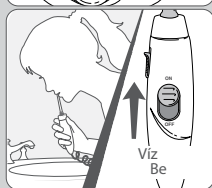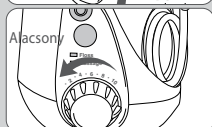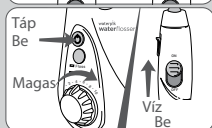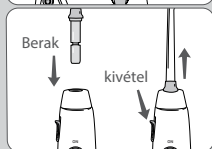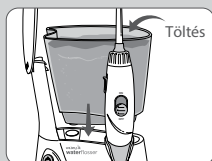

Az egység tápellátása

Dugja be a kábelt egy elektromos aljzatba. Ha a konnektort fali kapcsoló vezérli, győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva.

A tározó előkészítése

Emelje fel a tartály fedelét, vegye ki a tartályt, és töltsse fel langyos vízzel. Helyezze vissza a tartályt az alapra, nyomja le erősen, és zárja le a fedelet.

Hegy behelyezés és eltávolítás

Illessze a hegyet a Water Flosser fogantyújának közepébe, erősen nyomja le, amíg a hegy a helyére nem kattan. A színes gyűrű egy síkban van a fogantyú tetejével, ha a hegy megfelelően van a helyére rögzítve. A hegy eltávolításához nyomja meg a fogantyún lévő hegy kilökő gombot.

Feltöltő egység (csak első használatkor)

Állítsa magasra a nyomásszabályozó tárcsát az alapon (10-es nyomásbeállítás), irányítsa a fogantyút és a hegyet a mosogatóba. Kapcsolja BE a tápellátást és a vizet, amíg a víz ki nem folyik a hegyből.

Kapcsolja KI az egységet.

A nyomás beállításának beállítása


Az első használatához forgassa a nyomásszabályozó tárcsát az egység alján a legalacsonyabb beállításra (1. nyomásbeállítás). Idővel fokozatosan növelje a nyomást a kívánt beállításra – vagy fogorvosa utasítása szerint.

A Water Flosser használata

Mindig tegye a hegyet a szájába, mielőtt bekapcsolja a vizet. Ha a vízkapcsolót a fogantyún OFF állásban van, kapcsolja BE. Hajoljon a mosdó fölé, és enyhén csukja össze az ajkakát, hogy elkerülje a fröccsenést, miközben hagyja, hogy a víz folyjon a szájból a mosogatóba. Kapcsolja BE a vízkapcsolót. Ha végzett, kapcsolja ki a vízkapcsolót és KI. Használat közben leállíthatja a víz áramlását, ha a fogantyún lévő vízkapcsolót OFF állásba csúsztatja.

MEGJEGYZÉS: A motor továbbra is jár.

A legjobb eredmény elérése érdekében kezdje a hátsó fogakkal, és dolgozzon az előlő fogak felé. Irányítsa a patakat 90 fokban szögben az ínyéhez, a hegyével a szájban. Csúsztassa a hegyét az íny mentén, és rövid szünetet tartson a fogak között. Folytassa mindaddig, amíg meg nem tisztítja a felső és az alsó fogat belülről és kívülről.

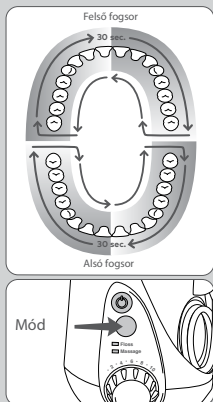

Egyperces időzítő/30 másodperces ingerlés (csak fogselyem módban)

A Water Flosser 30 másodpercnél rövid szünetet hoz létre, hogy emlékeztesse Önt arra, hogy lépjen a száj másik ívéhez, és egy újabb rövid szünetet 1 perccel jelez. elérték a javasolt tisztítási időt. Az egység szünet nélkül tovább működik, amíg ki nem kapcsolják. A nyomásbeállítástól függően 1 perc múlva némi víz marad a tartályban. Az időzítő igény szerint kikapcsolható. A deaktiválás lépései:

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg egyszer a mód gombot az egység felébresztéséhez.

Az egyik LED-nek világítania kell.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a Masszázs mód jelzőfénye villogni nem kezd. Az időzítő most ki van kapcsolva.

Ha újra szeretné aktiválni az időzítőt:

Amíg az egység ki van kapcsolva, nyomja meg egyszer a mód gombot az egység felébresztéséhez. Az egyik LED-nek világítania kell.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a Floss Mode jelzőfény villogni nem kezd. Az időzítő most aktiválva van.

Vagy húzza ki az egységet a gyári beállítások visszaállításához.

Hydro-impulzus masszázsmód

A Hydro-Pulse Massage egyedülálló vízpulzációs mintát kínál, amelyet az íny stimulációjának fokozására terveztek. A legjobb eredmény érdekében használja a Floss módot az utasításoknak megfelelően. A Floss Mode 1 perces használata után kapcsolja át a készüléket Masszázs módba, állítsa be a nyomást tetszés szerint, irányítsa a vízsugarat az ínyére, és masszírozza végig a száját. Annak meghatározásához, hogy az egység melyik üzemmódban van beállítva kikapcsolt állapotban, egyszerűen nyomja meg a mód gombot, és a LED lámpa jelzi az aktuális módot. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg ismét a mód gombot. A mód gomb megnyomásával a készülék bekapcsolt állapotában is módot válthat használat közben.

Mikor kész

Kapcsolja ki az áramellátást. Ürítse ki a tartályban maradt folyadékot. Húzza ki az egységet.

MEGJEGYZÉS: Ha a vízen kívül szájvizet vagy más oldatot használt, olvassa el a „Szájvíz és egyéb oldatok használata” című részt.

NEM TARTALMAZ MINDEN MODELL MINDEN HEGYET.**Pik Pocket™ Hegy**

A Pik Pocket™ hegyet kifejezetten arra tervezték, hogy vizet vagy antibakteriális oldatokat juttatjon mélyen a parodontális zsebekbe.

A Pik Pocket™ hegy használatához állítsa a készüléket a legalacsonyabb nyomásra. Helyezze a puha hegyet a foghoz 45 fokos szögben, és óvatosan helyezze a hegyét az ínyvonal alá, a zsebbe.

Nyelvtisztító tipp

Állítsa a legalacsonyabb nyomásra, helyezze a hegyét a nyelv közepére/közepére körülbelül félig hátrafelé. Enyhe nyomással húzza előre. Növelje a nyomást, ahogy tetszik.

Fogszabályozási tipp

A fogszabályozó hegy használatához óvatosan csúsztassa a hegyet az íny mentén, rövid szünetet tartva, hogy enyhén megmossa a fogak közötti területet és a fogszabályozó tartót, mielőtt a következő fogra lépne.

Fogkefe tipp

Helyezze a fogkefe hegyét a szájába úgy, hogy a kefefej a fog ínyvonalánál legyen. A fogkefe hegye használható fogkrémmel vagy anélkül. Enyhe nyomással (a sörték nem görbülhetnek meg) nagyon rövid mozdulatokkal masszírozza oda-vissza a kefét – ugyanúgy, mint egy kézi fogkefével.

Plaque Seeker™ Típp


A Plaque Seeker™ hegy használatához helyezze a hegyet a fogak közelébe úgy, hogy a sörték finoman érintsék a fogakat. Finoman csúsztassa a hegyét az ínyvonal mentén, rövid szünetet tartva a fogak között, hogy gyengéden keféljen, és hagyja, hogy a víz a fogak közé áramoljon.


Szájvíz és egyéb megoldások használata

A Waterpik® Water Flosser szájvíz és antibakteriális oldatok készítésére használható. Bármilyen speciális oldat használata után öblítse le az egységet az eltömődés megelőzése érdekében úgy, hogy a tartályt részben töltsé fel meleg vízzel, és futtassa az egységet úgy, hogy a hegye a mosogatóba mutasson, amíg az egység ki nem ürül.

Tartozékok tárolása

A két leggyakrabban használt hegy tartozéktárolója a tartály fedele alatt található, és könnyen elérhető a tartály eltávolításával.

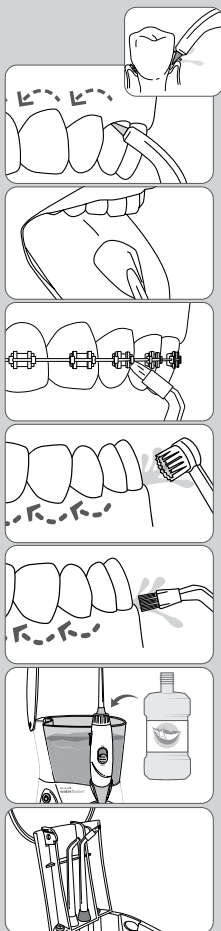

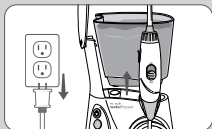

Tisztítás

Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Szükség esetén tisztítsa meg a terméket puha ruhával és enyhe, nem karcoló tisztítószerrel.

A víztartály kivehető a könnyű tisztítás érdekében, és mosogatógépben is mosható.

Kemény vízlerakódások eltávolítása / Általános tisztítás

Kemény víz lerakódások halmozódhatnak fel a készülékben, a víz ásványianyag-tartalmától függően. Ha felügyelet nélkül hagyja, akadályozhatja a teljesítményt.

Belső részek tisztítása: Adjon hozzá 2 evőkanál fehér ecetet egy teli tartály meleg vízhez. Irányítsa a fogantyút és a hegyet a mosogatóba. Kapcsolja BE az egységet, és működtesse, amíg a tartály ki nem ürül. Az öblítést megismételve egy teli tartály tiszta meleg vízzel. Ezt az eljárást 1-3 havonta kell elvégezni az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

A garancia nem vonatkozik a tartozékokra vagy fogyasztóeszközökre, például hegyekre stb.. A nem megfelelő feszültséggel történő használat károsíthatja a terméket, és a garancia érvényét veszti.



**Water Pik, Inc., a subsidiary of/ est une
filiale de Church & Dwight Co., Inc.
www.waterpik.com**



Designed and Tested in the USA.

Conçu et testé aux États-Unis..